

SHARP

家庭用光美容器

家庭用

取扱説明書

保証書付

形名

エフイー イーピー

FE-EP600



もくじ

ページ

はじめに	安全上のご注意	2
	使用上のお願い	6
	各部のなまえ	7
使いかた	使いかた	8
	お手入れ	13
困ったとき	こんなときは?	14
	保証とアフターサービス	16
	お客様ご相談窓口のご案内 仕様	17

裏表紙

お買いあげいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保管してください。

業務用として使用しないでください。

「COCORO MEMBERS」で「製品登録」をお願いします



入会特典

- 家電製品をWEBでまとめて管理できる!
- 登録製品に関する消耗品、取扱説明書などサポート情報へ簡単アクセス!
- 当社製品などが当たる抽選応募用「わくわくポイント」を進呈!
- 会員限定のキャンペーン・イベントに応募ができる!

COCORO MEMBERSは、シャープ製品/COCOROサービスをご利用のお客様向けのシャープの会員サービスです。






ココロメンバース 検索

<https://cocoromembers.jp.sharp/m/>

安全上のご注意(1) 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を、次のように区分して説明しています。

 危険	「死亡や重症を負う可能性が高い」内容。
 警告	「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。
 注意	「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。



危険

感電や火災などの事故や大けがを防ぐために



● 次の部位には使用しない

1. 口の内部、性器、粘膜
2. 整形、手術した部位
3. 甲状腺
4. 上まぶた、眼球、目の周り
5. ニキビ
6. シミ、ほくろ
7. 眉毛、髪の毛
8. 耳
9. 乳首、乳輪
10. ヘソ回り
11. 大静脈
12. タトゥー、ボディペインティング

● 紫外線ダメージ（やけど）がある場合は使用しない

● 皮膚が濃い肌には使用しない

（やけどやケガの原因）



● 顔に照射するときは必ず目を閉じて使用する

（ケガの原因）

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。



警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために



分解禁止

- 改造はしない。修理技術者以外は、分解・修理をしない
(火災・感電・けがの原因)

修理はお客様ご相談窓口にご連絡ください (17ページ)



水場使用禁止

- 浴室や湿気が多い所(水のかかる場所)で 使用・保管をしない
- 水に浸けたり、水をかけたりしない
(感電・ショート・火災・故障の原因)

電源プラグや電源コードは



- 電源プラグ・電源コード・コードプロテクターは乱暴に扱わない
引っ張らない、傷付けない、変形させない、加工しない、高温部に
近づけない、無理に曲げない、ねじらない、重いものをのせない、
挟み込まない、束ねたまま使わない
(断線・ショート・火災の原因)
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
(タコ足配線などで定格を超えると発熱し、火災・感電の原因)
- 電源プラグ・アダプタープラグは、根元まで確実に差し込む
- コードが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
- 電源は専用の電源コード以外は使用しない
また、専用の電源コードを他の商品に使用しない
(やけど・感電・ショートによる火災などの原因)
- めれた手で電源プラグ・アダプタープラグを抜き差ししない
(感電・ショート・けがの原因)

安全上のご注意(2) 必ずお守りください



警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

電源プラグや電源コードは



プラグを抜く

- 電源プラグ・アダプタープラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜く（故障・感電の原因）
- お手入れ時・使用後は、必ずメインスイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜く（やけど・感電・けがの原因）



- 電源は交流100-240Vで使用する
- 電源プラグ・アダプタープラグは、根元まで確実に差し込む
- 電源プラグ・アダプタープラグのホコリは定期的にとる（火災の原因）

ご使用時・保管に関して



- めれた手で使用しない（感電・ショート・けがの原因）
- 吸込口・排気口をふさがない（故障の原因）
- 衣類や髪の毛、人以外に照射しない（火災・やけど・故障の原因）
- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用しない
- 妊娠、授乳中、生理中の女性、糖尿病、肌が弱い方、光に敏感な方、光過敏症の方や、皮疹やアレルギーになりやすい方は使用しない（やけど・けがの原因）
- 黒いものに使用しない（故障等の原因）
- 引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレー・ガスなど）の近くで使用しない（爆発・火災の原因）



- 使用時には本製品を肌にしっかり密着させて使用する（けが・やけどの原因）
- 次の異常・故障時にはただちに使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて、お客様ご相談窓口へ点検・修理を依頼する（火災・感電・やけどの原因）
 - ・ こげ臭いにおいがする。
 - ・ 電源プラグ・電源コード・コードプロテクターが変形や破れなどにより傷んでいる。
 - ・ 本体が異常に熱い、部分的に変形している。
 - ・ 本体の中で異物が動く音がする。
 - ・ 使用中に異常な音がする。
 - ・ その他の異常や故障がある。



注意

感電や火災など事故やけがを防ぐために

ご使用时・保管に関して




- 落としたり、ぶつけたりしない
- 収納時にコードを本体やアダプターに巻きつけない
(感電・発火・故障の原因)
- ぬれた肌には使用しない
- アクセサリーなどの金属類をつけたまま使用しない
(感電・けがの原因)
- 業務用として使用しない
- 電源を切ったあと、ファンが停止するまで、コンセントから電源プラグを抜かない (故障の原因)
- 血管腫・美容整形部位には使用しない
- 使用から24時間以内は、できる限り使用部位を紫外線にあてない
- 本製品を使用した直後は制汗剤を使用しない
- 肌を守るため、次の人は使用しない
 - ・ 成長期の子供
 - ・ 自分で意思表示ができない人
(やけどや肌トラブルの原因)
- 肌を守るため、次のようなときには使用しない
 - ・ 体調のすぐれないときや、肌・身体に異常を感じるとき
 - ・ 入浴直後の肌に赤みやほてりが残っているとき
(炎症、痛みの増加などのトラブルや症状悪化の原因)




- 使用する際は付属のサングラスを装着する
- ご使用前には照射部に変形・割れ・破損がないか確認する
- 18歳未満の人が使用する際は、保護者が本書を読み、正しい使いかた・禁止事項を指導する (やけどや肌トラブルの原因)
- 薬を服用している人は服用後1週間は使用期間をあげる
薬を継続して服用されている人は皮膚科医に相談する
(服用されている薬によっては肌が光刺激に敏感になり、肌トラブルの原因)
- 肌に炎症(赤くなるなど)が発生した場合は使用を中止する
2日たっても炎症が続く場合には、医師に相談する
(症状悪化の原因)

使用上のお願い

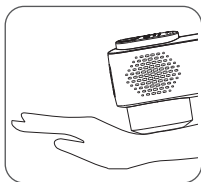

肌色が濃い方は本製品を使用しないでください。

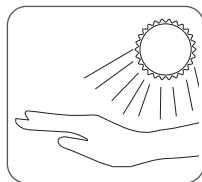

使用の前後にはなるべく照射部位に紫外線を当てないようにしてください。



暗い環境の中では使用しないでください。




使用する際は付属のサングラスを装着してください。




使用する前にシェーバーなどで毛を剃ってください。



初めて使用する時は必ずレベル1からにしてください。

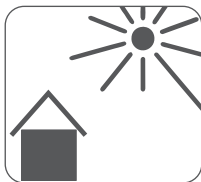


直射日光の当たる場所で使用しないでください。故障の原因になります。

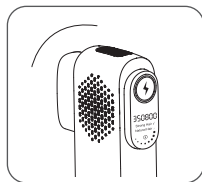


本製品に強い衝撃を与えたり、振らないでください。

各部のなまえ

本体

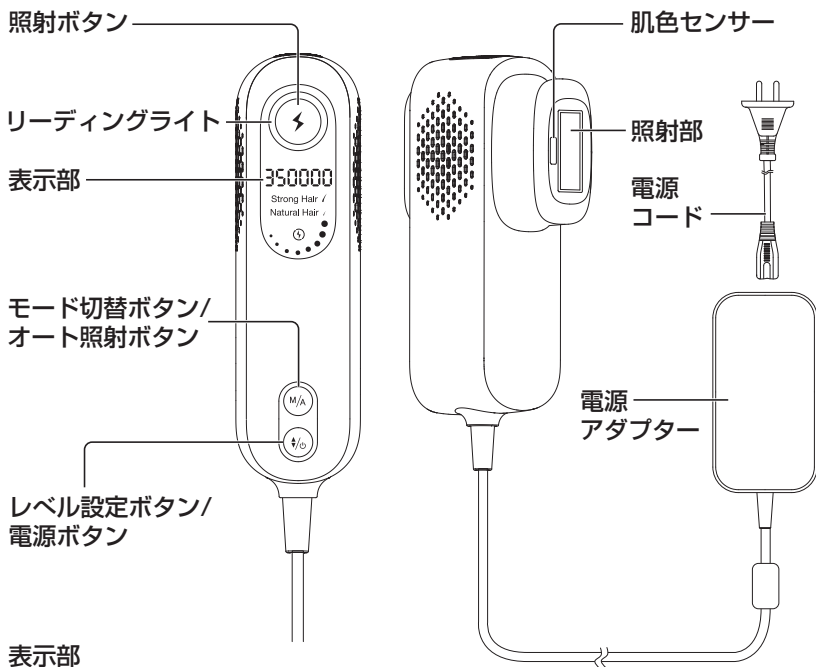


表示部

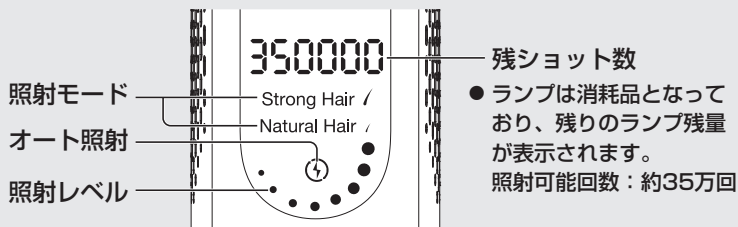

- 付属品：取扱説明書(保証書付)、サングラス、ポーチ
- 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

使いかた(1)

警告

 浴室や湿気の多い所(水のかかる場所)で使用・保管をしない
水害使用禁止

【感電・ショート・火災・故障の原因】

施術前の準備









- お肌の表面を清潔にし、シェーバーなどで毛を剃った状態でご使用ください。(香水、乳液、クリームなどが残っていない状態にしてください)
- 照射面にホコリ、毛などの付着物がないことを確認してください。照射面を必ずきれいに拭きとってから照射してください。付着物が残った状態での使用は、製品の故障、劣化、肌トラブルの原因になります。

照射レベルの設定

モードごとにパワー設定を変更してあります。
肌の色に合わせてご使用ください。

肌色に関係なく初回はレベル1から使用し、徐々にレベルを上げるようにしてください。


毛の太さ \ 肌色		肌色					
							
細い	Natural Hairモード	7 / 8	6 / 7 / 8	4 / 5 / 6	2 / 3	1	×
	Strong Hairモード	6 / 7 / 8	5 / 6 / 7	2 / 3 / 4	1	2	×
普通	Natural Hairモード	7 / 8	6 / 7 / 8	4 / 5 / 6	2 / 3	1	×
	Strong Hairモード	6 / 7 / 8	5 / 6 / 7	2 / 3 / 4	1 / 2	2	×
太い	Natural Hairモード	7	6 / 7	4 / 5	2	1	×
	Strong Hairモード	6 / 7	5 / 6	2 / 3	1	2	×

ご注意

- 「×」は使えない肌色です。数字は使用推奨レベルです。
- カラーチャートを確認して使用レベルをご確認ください。
- 施術回数や環境によって肌の反応が変わってくる可能性があります。

基本的な使いかた

1

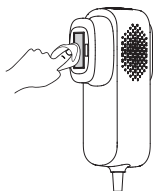


照射面を消毒する

アルコールで湿らせたコットンまたは綿棒で照射面の消毒をします。

- 電源がOFFの状態で行ってください。

2

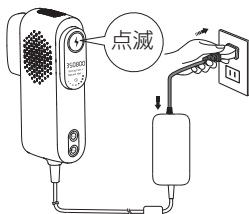

コンセントにプラグを挿す

電源コードを電源アダプターに差し込み、プラグをコンセントに接続するとリーディングライト (7ページ) が点滅します。

3



電源をONにする


電源ボタンを長押しして電源をONにすると、リーディングライトの光が消え、画面が表示されます。

4



照射レベルの設定

初期設定は「手動照射モード」、
「Strong Hair レベル 1」です。
モード切替ボタンを短押しすることで、
Strong Hair と Natural Hair の切り替えが
できます。
電源ボタンを短押しすることで、レベル変更
ができます。

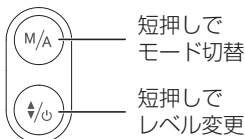

- 残ショット数は常に表示されています。
- オート照射モードの使いかた (11ページ)

使いかた(2)

基本的な使いかた (続き)


5



付属のサングラスを装着する

使用する際は、目を保護するために付属のサングラスを装着してください。


6

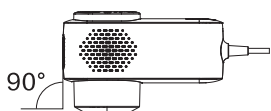

照射開始

照射面を垂直に照射部位に当てて、お肌に密着させてください。
リーディングライトが点灯します。
これは照射可能な状態を示しています。
照射ボタンを押すと光が照射されます。

ご注意

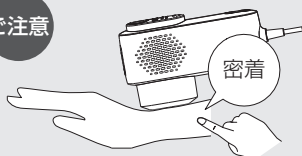

- 肌色が黒い箇所や、照射面をしっかりとお肌に密着させていない場合、肌色センサーが正常に識別できず照射ができません。お肌の状態を確認しながら使用してください。

7



使用後のケア

使用後は、お肌を保冷剤や冷たいタオルで冷やし、化粧水やクリームなどで保湿してください。

ご使用のポイント

● 脇のお手入れ

お手入れする前に、脇についている制汗剤、香水、その他化粧品などをきれいに拭きとってください。

シワのある部位は指先で伸ばして使用してください。

● Vラインのお手入れ

色素沈着、色が黒ずんでいるところはレベルを下げて使用してください。慣れるまではレベル1を使用してください。

● 手と足のお手入れ


丸みのある部位はなるべく伸ばし、しっかり照射面を密着させて使用してください。


オート照射モードの使いかた

1



オート照射モードを選択する

モード切り替えボタンを長押しすることで表示画面にオート照射アイコン  が表示され、設定完了となります。

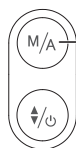


長押し3秒で
オート照射
モードに切替



オート照射
アイコン

2

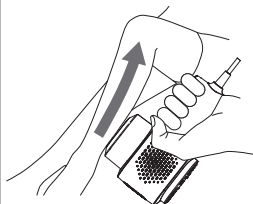

お手入れスタート

照射面をお肌に密着させることで、照射ボタンを押さなくても一定間隔で照射されます。

照射面をゆっくりスライドさせて照射位置を変えてください。

- 再度モード切替ボタンを長押しすることで手動照射モードに戻ります。
- 何も操作がないと約10分後に自動で電源OFFになります。

使いかた(3)

スキンケア

- 使用直後に香水、機能性化粧品、スクラブ成分含有の化粧品をお手入れ部位に使用しないでください。
- 使用後24時間以内は、なるべく紫外線に当てないでください。必要であれば日焼け止めを使用してください。
- お肌などに異常が発生したら、ただちに使用を止め、医師にご相談ください。
- 日焼けをした状態で使用をすると、トラブルの原因となります。本製品を使用中は日焼けをしないようにご注意ください。日焼けをしてしまった場合、1週間以上空けてから本製品を使用してください。
- ムダ毛ケアした部位を整形する場合、医師にご相談ください。

ご注意

- 正しい手順で使用しても、お肌にトラブルが発生してしまう可能性があります。お肌にトラブルが発生した際は本製品の使用を中止し、医師にご相談ください。

使用頻度（目安）

時間	第1～4週	第5～8週	第9～12週
頻度	2～3回/週	1～2回/週	1～2回/月

ご注意

- 毛の成長度合いに応じて調整してください。毛が濃い部位にはレベルと使用頻度を上げて使用してください。また、目安よりも高い頻度で使用してください。

お手入れ

警告

必ず電源プラグをコンセントから抜き、製品が冷めてからおこなう
プラグを抜く

【感電・発火・やけど・けがの原因】

本製品の効果と寿命を保つために、使用後には必ず毎回本製品のお手入れをしてください。



本製品を水洗いしないでください。

本体

お手入れ時期：使用後毎回

乾いた柔らかい布やコットンで拭く


本体に化粧品などが付着したままにしておくと、変色・割れの原因になります。

照射部

お手入れ時期：使用後毎回

水で濡らした綿棒やコットンで拭く

照射面に毛やホコリが付いた状態で使用すると、効果の低下や製品の劣化に繋がります。

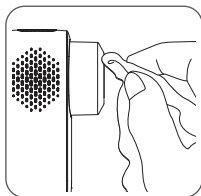

汚れがひどいときは水の代わりにアルコール（濃度96%以下）を使用してください。照射部の汚れが取れない場合は、製品の使用を中止し、お客様ご相談窓口にご相談してください。

本体、照射部のお手入れに次のものは使わないでください。

(表面の変色・ひびわれや、内部(精密部)に液が浸透すると故障の原因)



シンナー
ベンジン



オープンクリーナー
クレンザー
漂白剤



柑橘類由来成分
含有洗剤
(リモネンなど)



住宅・家具用
合成洗剤
(アルカリ性)



スプレー式洗剤
金属タワシ


使
い
か
た

お
手
入
れ

こんなときは？

修理依頼やお問い合わせの前に
もう一度お調べください。

こんなとき	お調べください	参照 ページ
電源が入らない	● 電源アダプターとアダプタープラグ、 電源プラグがしっかり差し込まれていますか？ ⇒ 電源アダプター、アダプタープラグ、 電源プラグをしっかり接続してください。	9
照射できない	● 照射部周辺や本体の温度が高すぎませんか？ ⇒ 本体が常温まで下がってから照射して ください。	—
	● 照射面を肌に密着させていますか？ ⇒ 照射面をしっかり密着させてください。	10
リーディングライトが 点灯しない	● 照射面を肌に密着させていますか？ ⇒ 照射面をしっかり密着させてください。 ● 電源を入れなおしても点灯しない場合は使用を 中止し、お客様ご相談窓口にご相談ください。	10
照射した時に 臭いがする	● 照射面に毛がついている等の汚れが ありませんか？ ⇒ 照射面を綺麗にお手入れしてください。	13
使用中、違和感がある	● お手入れ箇所の毛を剃っていますか？ ⇒ 毛をしっかり剃ってください。	8
	● 照射レベルが高すぎませんか？ ⇒ 照射レベルを下げてください。	8
	● 照射面が破損していませんか？ ⇒ 破損している場合、ただちに使用を中止 し、お客様ご相談窓口にご相談ください。	—
使用中 本製品が熱くなる	● 使用時間が長すぎませんか？ ⇒ 電源をOFFにして本体が常温まで 下がってから使用してください。	—

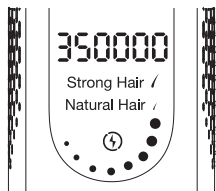

- エラー表示について
エラー内容が液晶画面に表示されます。

エラー表示	お調べください	参照ページ
Err 1	<ul style="list-style-type: none"> ● 内部ファン動作エラーです。 ⇒ 電源をOFFにして本体が常温まで下がってから、もう一度電源をONにしてください。 ● くり返しエラー表示になるときは、使用を中止し、お客様ご相談窓口にご相談ください。 	—
Err2/Err4	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体温度エラーです。 ⇒ 電源をOFFにして本体が常温まで下がってから、もう一度電源をONにしてください。 ● くり返しエラー表示になるときは、使用を中止し、お客様ご相談窓口にご相談ください。 	—
Err3	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源エラーです。 ⇒ ただちに使用を中止し、お客様ご相談窓口にご相談ください。 	—

こんなときは？

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは 持込修理

- 1 「こんなときは？」(14~15ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 3 お客様が相談窓口にご連絡ください。

保証期間中

- 修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理または同等商品と交換させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理または同等商品と交換させていただきます。

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名
電 話 () -
お買いあげ日 年 月 日

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

保証書

- 保証書は (18, 19ページ) にあります。
- 保証期間 … お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。ラベル(製造番号などを表示)をはがすと、保証を受けられない場合があります。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は家庭用光美容器の補修用性能部品を、製品の製造打切後、5年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検



長期で使用する場合は商品の点検を！
こんな症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 本体が変形していたり、コゲ臭いにおいがする。
- 風が出たり、出なかったりする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから取りはずし、必ずお客様ご相談窓口にご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用はお客様ご相談窓口へ、ご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後1~4年程度たちましたら、安全のため点検をおすすめします。点検費用については、お客様ご相談窓口にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト！

シャープ お問い合わせ 検索

<https://jp.sharp/support/>

スマートフォンや
携帯電話はこちらから



使用方法のご相談など

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

0120-078-178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570-550-449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050-3852-5405	06-6792-5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	



修理や持込修理のご相談など

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

0120-02-4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570-550-447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050-3852-5520	06-7732-8086
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

※沖縄県にお住まいのお客様については、那覇サービスセンターにおかけください

電話：098-861-0866 (受付時間：年末年始を除く月曜～金曜 9:00～17:00)

「宅配業者引き取りサービス」のご案内

※サービスエリア：日本国内地域。ただし、沖縄県を除く。

当社指定の宅配業者が修理依頼品をお引き取りし、修理完了後に修理完了品をご自宅までお届けするサービスです (有料)

<https://soss.jp.sharp/consumer/carry-in-repair/>

宅配業者引き取り
サービスはこちら



■ご利用料金：「宅配業者引き取りサービス」のご利用は保証期間内・保証期間外にかかわらず有料となります。

[往復の運送費+梱包資材費+代引き手数料]がかかります。

(保証期間内の修理料金は、保証書記載の「無料修理規定」に準じます。また、保証期間外は有料です)

■所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2026年1月現在)

■QRコードについて

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報の取扱いの詳細については、<https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html> をご参照ください。

仕様

形名	FE-EP600
電源	AC100 -240V 50/60Hz
定格電流	1.3 - 0.55A
照射可能回数	約35万回
質量	約315g (本体のみ)

お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度
「こんなときは?」(14~15ページ)をご確認ください。



Webもご活用ください
[シャープオンラインサポート]

シャープ お問い合わせ
<https://jp.sharp/support/>



使用方法のご相談など



固定電話からは、フリーダイヤル
0120-078-178



携帯電話からは、ナビダイヤル
0570-550-449



修理のご相談など



固定電話からは、フリーダイヤル
0120-02-4649



携帯電話からは、ナビダイヤル
0570-550-447

※非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。詳しくは、取扱説明書17ページをご覧ください。

シャープ株式会社

本社 〒541-8522
大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目1番25号

Printed in China
TINSJA188XBRZ 26B - ①