


## リモートフィットサービス

### ご利用タイミング

購入後90日間は  
調整(フィッティング)が  
何度でも無料

さらに必要な方には  
有料オプション  
「リモートフィット  
サービス(追加30)」

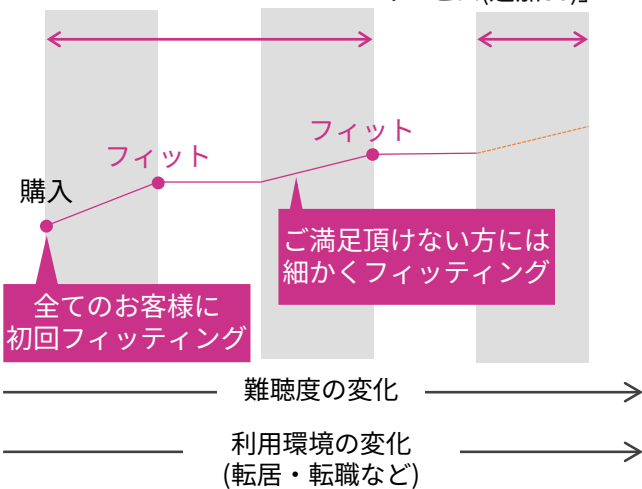

全てのお客様に  
初回フィッティング

ご満足頂けない方には  
細かくフィッティング

アシスタント(チャット)/聴こえのトレーニング/  
ご相談・お問い合わせはいつでもご利用頂けます。(無料)

## ご購入後のサポート (有料オプション)

MH-LS04

COCORO LISTENING

補聴器あんしん  
サービス

1. サービス料金  
月々払い
2. 延長保証\*
3. 盗難・紛失補償\*

\*故障・紛失時の製品交換  
費用が割引になります。

MH-LS05

COCORO LISTENING

リモートフィットサービス  
(追加30)

30日



※補聴器あんしんサービスは、新品のメディカル  
リスニングプラグのご購入から1か月以内のみ  
ご加入可能です。

※オプションサービスの詳細は、メディカル  
リスニングプラグ公式サイトをご覧ください。

## ご購入にあたっての注意事項

- 本製品は軽度～中等度難聴の聴力を補う機器です。  
また、聴こえには個人差があります。軽度～中等度難聴の方であっても  
適応できない場合があります。
- 補聴機能の効果を発揮するため、使用開始前に適切な調整(フィッティング)  
が必要です。
- 難聴の度合いが心配な方は、耳鼻咽喉科の受診をおすすめします。
- 本製品の調整にはスマートフォンが必要です。

### メディカルリスニングプラグ MH-L1-B/MH-L1-Pスペック表

一般的名称/医療機器認証番号	耳あな型補聴器/303AFBZX00058000
適応難聴度	軽度～中等度難聴
サイズ(長さ×幅×高さ)/質量	25.0mm x 13.6mm x 24.1mm/5.8g/個
カラー	ブラック、ナチュラルピンク
補聴器(リスニングモード)の性能*1	
チャンネル数	8ch
シーンメモリ数	4
最大音響利得	最大値(ピーク値):48dB HFA-FOG:37dB
90dB入力最大出力音圧レベル	最大OSPL90:115dB SPL HFA-OSPL90:110dB SPL
補聴器の機能	ハウリング抑止/ノイズリダクション/衝撃音抑止
オーディオイヤホン(ストリーミングモード)	完全ワイヤレス方式(TWS)
ハンズフリー通話	電話の着信と通話に対応
対応スマートフォンOS	Android™ 8.0以上またはiOS 13以上
Bluetooth®*2	Bluetooth 5.0/HFP, A2DP, AVRCP
対応バージョン/プロファイル	Bluetooth 5.0/HFP, A2DP, AVRCP
電池	
種類/容量	リチウムイオン充電電池/3.7V 70mAh
使用時間*3	リスニングモード時:約20時間(約55時間)
カック内は充電ケース併用時	ストリーミングモード時:約6時間(約16時間)
充電完了時間	約2時間40分
補聴器本体の防水等級/防塵等級	Class4 (IPX4*4)/Class6 (IP6X*5)
充電ケース	同梱(USB Type-C™、USB Type-Aの充電に対応)

\*1 数値はJIS C 5512:2015により測定(2cm<sup>3</sup>カプラーを使用)。

\*2 すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。Bluetoothプロファイルとは、Bluetooth製品の特性ごとに機能を標準化したものです。

\*3 使用環境により変化します。

\*4 IPX4とは、30～50cmの距離から10リットル/分の水を10分以上注水しても本体に有害な影響がないことを意味します。

\*5 IP6Xとは、直径75μm以下の塵埃が本体に入らないような機能を有することを意味します。

○「メディカルリスニングプラグ/Medical Listening Plug」「ココロストア/COCORO STORE」「ココロリスニング/COCORO LISTENING」は、シャープ株式会社の登録商標または商標です。○iOSは、Apple Inc.のOS名称です。iOSは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。○AndroidはGoogle LLCの商標です。○Bluetooth®のワードマークは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、シャープ株式会社は、これらのマークをライセンスにもとじて使用しています。○USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。○QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。○そのほかの記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

製造販売元

株式会社ニューロシューティカルズ

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-10

販売店

製造元

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

SHARP

Be Original.

メディカルリスニングプラグ

耳あな型補聴器

軽度～中等度難聴者向け

カタログ 2024-6

MH-L1-B/MH-L1-P

希望小売価格99,800円(非課税)



まずは  
ここを  
チェック!

メディカルリスニングプラグ  
公式サイト

<https://jp.sharp/mlp/>

補聴器選びのお役立ち情報満載!



COCORO LISTENING サービスセンター

問い合わせフォームからお問い合わせください  
<https://cocorostore.jp.sharp/form/mlp-inquiry/>

受付時間 平日10:00～17:00  
(土日、祝日、年末年始を除く)

お問い  
合わせは  
こちら!



# 自宅に居ながらフィッティング




忙しい人でも、  
始めやすい・使いやすい  
リモートサービスを可能に



## 聴こえづらさは人それぞれ。

高い音が聴こえにくい、低い音が苦手など、人によって聴こえ方は違います。そのため補聴器は全体的に音を大きくするのではなく、聴き取りにくい音だけを補完することで、耳にやさしくバランスの取れた聴こえを実現します。これがフィッティングです。

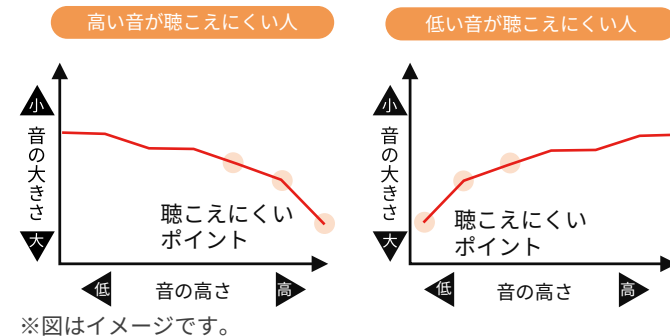

### 簡単

#### 必要な時にサッと取り出し お洒落に装用

充電器から取り出し、本体のタッチセンサーを**3秒タッチ**するだけですぐに補聴器としてお使いいただけます。本体のみでボリューム調整もシーン切り替えも簡単！スマートフォンのワイヤレスイヤホンとしても使えます。  
※初めてご利用いただく際の設定とフィッティングにはスマートフォンが必要です。



### 便利

#### さまざまな使用環境に合わせて 10種類のシーンを選べます

適切なシーンに切り替えてお使いいただくことで、使用環境に応じてより会話が聞き取りやすくなります。

- オンライン会議
- デスクワーク
- 打ち合わせ(少人数)
- 会議(大人数)
- 騒がしいところ
- バス・電車
- リビング
- レストラン
- 屋外スポーツ
- コンサート



オンライン会議



コンサート