



■ 洗浄物に応じて選べる豊富なオプション類

- 器具用5段ラック
  - 棚板を全段取り外すことができ、アダプタを装着することも可能です。
- ラバロ鉗子用アダプタ
- チューブ用アダプタ
- 器具用4段ラック
- 麻酔器具用ラック
- クロックス用ラック\*
- 吸引嘴管用アダプタ
- 器具用バスケット(標準、深型)
- マイクロ器具用バスケット(標準、小型)
- 専用台車
- 温度記録計\*
- 洗浄剤自動切替システム\*

\*クロックスはCrocs, Inc.の登録商標です。 \*装置本体出荷時のみ対応可能。

■ 優れた洗浄効果を発揮する専用洗浄剤


- アルカリ性洗浄剤 (無リン・無泡性)
  - MU-M580L (アルミ器具対応)
  - MU-M570L
  - MU-M510L
- 酵素配合中性洗浄剤 (無リン・無泡性)
  - MU-M700L
  - MU-M750L
- 水溶性潤滑防錆剤 (無リン)
  - MU-MM100L
  - MU-M600L (乾燥促進剤入)

\* 当社製のシャワー用・無泡性の洗浄剤・潤滑防錆剤をご使用ください。泡が立ちますと、装置の故障や洗浄不良の原因になります。当社製の洗浄剤を使用して、装置の品質や洗浄効果を確認しており、他社の洗浄剤を使用した場合、意図した性能が得られない恐れがあります。

■仕様		
外形寸法 (mm)	MU-7500D:幅1,090×奥行1,000×高さ1,900 (超音波発振器込み 2,100) (開扉時の高さ:2,355) MU-7500S:幅1,090×奥行1,000×高さ1,900 (超音波発振器込み 2,100) (開扉時の高さ:2,355)	
質量	MU-7500D:本体 約780kg (超音波発振器除く) 運転時 約1,290kg (高水位時、超音波発振器含む) MU-7500S:本体 約780kg (超音波発振器除く) 運転時 約1,290kg (高水位時、超音波発振器含む)	
必要設備	電源	3相 200V 18kVA以上 (50A以上のブレーカー)
	給水	20A 配管 (SGP、バルブ止め) 0.1~0.2MPa、40L/分以上
	給湯	20A 配管 (SGP、バルブ止め) 0.1~0.2MPa、40L/分以上
	純水	20A 配管 (SUS、バルブ止め) 0.1~0.2MPa、30L/分以上
	排水	40A 配管 (SGP) 自然排水60L/分以上 背圧がないこと (排水温度は最高93℃になります)
	排気	口径150mm 風量:3~5m³/分の吸い込みダクトに接続
	給蒸	20A 配管 (SUSまたはSTPG) 0.3~0.5MPa
排蒸	20A 配管 (SUSまたはSTPG) 背圧がないこと	
定格電源容量	3相 200V 15kVA 50/60Hz	
モニター	搬入側:10.4型TFTカラー液晶タッチパネル 搬出側:5.7型TFTカラー液晶タッチパネル (MU-7500Dのみ)	
洗浄終了表示	ブザーと終了メッセージの表示	
洗浄コース	20コース設定可。コース名称はコース毎に設定可能	
洗浄モード	予洗、洗浄、高温洗浄、超音波洗浄、貯めすぎ、すすぎ、高温除染、潤滑防錆、乾燥 (洗浄コース毎に設定可能)	
洗浄槽内寸法 (mm)	幅700×奥行794×高さ880	
ラック占有寸法 (mm)	幅640×奥行790×高さ630	
洗浄槽容積	約500L	
洗浄温度 (液温)	常温~93℃ (高温除染工程)	
薬剤投入ポンプ	3系統 (洗浄剤用 2系統、潤滑防錆剤用 1系統)	
給排水	自動	
高周波出力	最大2400W 40kHz スイープ制御	
安全機能	漏電ブレーカー、過負荷防止機能 (ポンプ・ブロー)、空焚き防止回路 (槽内ヒーター・乾燥ヒーター)、扉ドレン部漏水検知回路	
収納バスケット数	当社標準バスケット (5段ラック使用時) 15枚収納	
外部出力端子	USBポート 1口 (洗浄帳票作成システム専用)	

クラス分類:クラスI (一般医療機器) 一般的名称:器具除染用洗浄器 (JMDNコード:35424000)  
医療機器製造販売届出番号:29B2X10011000006 (MU-7500S)、29B2X10011000007 (MU-7500D)

■ 外形寸法図 (単位:mm)

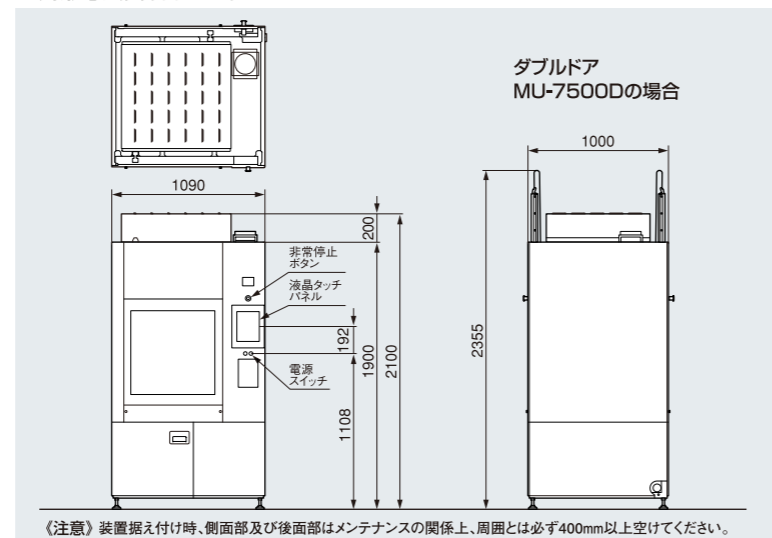

《注意》 装置据え付け時、側面部及び後面部はメンテナンスの関係上、周囲とは必ず400mm以上空けてください。

<QRコードから誘導されるサイトについてのご注意> ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■商品ご理解のために  
 ■商品ご使用について ●当製品は国内仕様です。海外ではご使用になれません。 ●ご使用前に「取扱説明書」、「本体注意ラベル」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●本機の設置には特殊な技術が必要です。お買い上げの販売店、または弊社営業窓口にご相談ください。お客様自身による工事は一切行わないでください。  
 ■カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●画面は全てハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。 ●マイクロソフト、Windowsは、マイクロソフトグループの企業の商標です。 ●本カタログに掲載された製品の中には、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。 ●本カタログ掲載の製品には、警告表示ラベルのあるものもありますので、ご注意ください。

安全にお使いいただくために ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●シャープ 医用洗浄装置 ホームページ  
<https://jp.sharp/business/medical-cleaning-systems/>

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとってください。

製品に関するご相談  
 シャープマーケティングジャパン株式会社 ビジネスソリューション社  
 スマートエンタープライズソリューション第1営業統轄部  
 東京 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号 電話 (050)5213-6458 (代表)  
 大阪 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号 電話 (050)5444-7802 (代表)  
 福岡 〒812-0881 福岡市博多区井相田2丁目12番1号 電話 (050)5444-7802 (代表)

《故障/修理に関するご相談》  
 シャープマーケティングジャパン株式会社 ビジネスソリューション社  
 ナビダイヤル 0570-061010  
 ナビダイヤルは全国一律料金でご利用いただけます。  
 ●IP電話・PHSからはご利用できません。電話 (043) 331-6059へおかけください。  
 受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:40 (日曜・祝日および年末年始を除く)

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地  
 製造販売元 〒639-1186 奈良県大和郡山市 美濃庄町492番地 (奈良事業所)



<https://corporate.jp.sharp/>

このカタログの内容は、2025年9月現在のものです。

ビ(マ)-1319 H.2 MU7500L

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。



SHARP

ジェットウォッシャー超音波洗浄装置

<https://jp.sharp/business/medical-cleaning-systems/>

シングルドア MU-7500S  
 ダブルドア MU-7500D

2025-9

強さ、やさしさ、速さが進化したW洗浄



MU-7500D (グリーン系)

JETWASHER × ULTRASONIC  
 MU-7500  
 SERIES

●写真はイメージです。各種オプションを含みます。●画面はハメコミ合成です。

本カタログ掲載商品には、ご購入の際、消費税等が別途付加されます。配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は、販売店におたずねください。

